

Anleitung: Farbwahl im digitalen Zeitalter

1

Grobfarbbestimmung:


- mit «VITA classical A1-D4®» Farbschlüssel



2

Bei verfärbten Zahnstümpfen:

- zwingend Stumpffarbe ermitteln
- Empfohlen wird der «IPS® Natural Die Material»
- Farbmusterschlüssel von Ivoclar

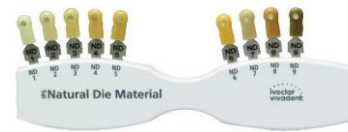

3

Digitales Foto mit Farbmuster in Situ:

Hardware:

- Digitale Spiegelreflexkamera mit Ringblitz o.ä.
- Mobiltelefon Kamera (z.B. iPhone)
- Mobiltelefon Kamera mit «Smile Lite MDP» (perfekte Lösung)
- Bei volldigitalem Workflow (z.B. mit Straumann SIRIOS oder TRIOS), kann ergänzend die digitale Farbmessung verwendet werden



4

Im Falle eines Frontzahnes oder Anproben/ Korrekturen:

Erneutes Foto mit Farbmuster in Situ nehmen



Wichtiger Hinweis: Alle ermittelten Farben müssen per Auftragsblatt des Intraoralscanners oder im Fall einer konventionellen Abformung, auf dem regulären Laborbestellformular vermerkt werden.

Bei Fragen & Unklarheiten: Tel. **0800 810 817**

E-Mail: **service.ch@straumann.com**